

PL



ageLOC® Galvanic Body Spa

## Ważne ostrzeżenie

Przed rozpoczęciem należy zapoznać się z poniższymi wskazaniem:

1. Przed rozpoczęciem zabiegu należy każdorazowo sprawdzić stan urządzenia. Szczególnie należy zwrócić uwagę czy nie występuje porowata lub uszkodzona powierzchnia, ostre krawędzie czy wybrzuszenia. W razie zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości, należy zaprzestać używania urządzenia i skontaktować się z lokalnym biurem Nu Skin. Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze pokojowej, przy minimalnej temperaturze 4°C w celu zapobiegania tworzeniu się pęcherzyków na chromowych częściach urządzenia.
2. ageLOC® Galvanic Body Spa należy stosować wyłącznie na nieuszkodzonej skórze. NIE należy stosować na powierzchni otwartych ran, w przypadku stanów zapalnych, a także przy skłonności do trądziku różowatego, uczulenia na metal lub problematycznej bądź nadwrażliwej skórze. Kobiety w ciąży, osoby z wszczepionym rozrusznikiem serca lub metalowymi implantami, osoby noszące metalowe aparaty korekcyjne lub cierpiące na epilepsję czy też inną chorobę powinny skonsultować się z lekarzem przed użyciem urządzenia.
3. NIE należy stosować urządzenia na twarzy ani innych wrażliwych partiach skóry. Urządzenie oraz kompatybilne produkty przeznaczone są wyłącznie do użytku zewnętrznego na wyznaczonych obszarach ciała. W przypadku wystąpienia zaczerwienień lub objawów podrażnienia skóry, należy natychmiast zaniechać stosowania, **zaś w razie potrzeby zasięgnąć porady medycznej**. Jeśli pomimo tego powyższe symptomy nie ustąpią, należy skonsultować się z lekarzem. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
4. Osoby o skórze wrażliwej i skłonnej do reakcji alergicznych, a także użytkownicy korzystający z nowego urządzenia Spa po raz pierwszy powinni zawsze najpierw przetestować urządzenie na niewielkiej powierzchni skóry np. za uchem lub na wewnętrznej stronie ramienia.
5. Należy używać urządzenia wyłącznie zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi. NIE używać dłużej lub częściej niż wskazują niniejsze zalecenia.
6. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy usunąć wszelkie folie zabezpieczające.
7. Urządzenie zawiera baterie. Aby uniknąć ryzyka obrażeń, porażenia prądem, pożaru i poparzeń nie zanurzać urządzenia w wodzie. Nie przechowywać lub nie kłaść urządzenia w miejscach, z których może łatwo wpaść do wanny, umywalki, toalety lub pod prysznic. Nie używać uszkodzonego urządzenia. Nie posługiwać się urządzeniem w sposób inny niż zalecany w instrukcji obsługi.
8. Niniejszy „Przewodnik Szybkiego Startu” nie zawiera kompletnych informacji potrzebnych do prawidłowego posługiwania się urządzeniem lub do przeprowadzenia zabiegu. Przed użyciem urządzenia Galvanic Body Spa i kompatybilnych produktów należy zapoznać się z pełną wersją instrukcji obsługi, która jest dostępna na płycie CD-ROM dołączonej do zestawu lub w Bibliotece zakładki Biuro.


W celu zapewnienia odpowiedniej utylizacji urządzenia ageLOC® Galvanic Body Spa i baterii należy postępować zgodnie z przepisami krajowymi w zakresie utylizacji urządzeń elektrycznych i baterii. Tego typu urządzenia nie powinny być wyrzucane łącznie z innymi odpadami z gospodarstwa domowego.

## ageLOC® Galvanic Body Spa – schematy i legenda

ageLOC® Galvanic Body Spa to programowane urządzenie wyświetlające specyficzne oznaczenia.

### Elementy urządzenia:


- 1 Ekran
- 2 Klawisz włączania/wyłączania
- 3 Chromowa płytka aktywacyjna
- 4 Komora na baterie (z już zainstalowanymi dwoma bateriami AAA)
- 5 Przystawka przewodząca ageLOC®

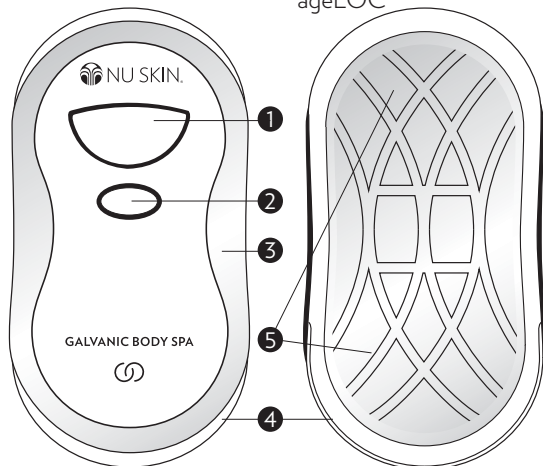

### System oznaczeń:

- 6 Wskaźnik wyczerpującej się baterii – ikonka, która zapala się, gdy poziom baterii jest niski.
- 7 Symbol ageLOC® – ikonka, która pojawia się, kiedy urządzenie jest włączone.
- 8 Zegar i cyfra 5 – ikonki, które wskazują na czas trwania zabiegu, czyli 5 minut.

**Uwaga:** Przed użyciem usunąć folię zabezpieczającą.

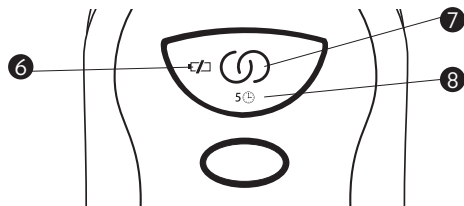

## Wskazówki – Krok po kroku

Jak korzystać z urządzenia ageLOC® Galvanic Body Spa?

### 1. Nałożenie żelu ageLOC® Body Shaping Gel

- Rozprowadzić żel wyłącznie na powierzchni skóry, która ma być poddana zabiegowi.
- Nacisnąć klawisz włączania/wyłączania jeden raz. Na środku ekranu pojawi się symbol ageLOC®. Pod spodem wyświetli się czas zabiegu, wynoszący 5 minut.

### 2. Wykonywanie zabiegu

Zacząć od nawilżenia palców i wewnętrznej strony dłoni wodą lub NaPCA Moisture Mist. Trzymać urządzenie odpowiednio nawilżoną dłońią tak, aby palce dotykały chromowej płytki aktywacyjnej. Przyłożyć przystawkę do skóry, w miejscu nałożenia ageLOC® Body Shaping Gel. Na początku zabiegu rozlega się pojedynczy, dwukrotny lub trzykrotny sygnał dźwiękowy oznaczający, że urządzenie automatycznie dostosowuje natężenie prądu do rodzaju skóry. Masować powoli okrężnymi ruchami w miejscach nałożenia produktu, wzdłuż ud, ramion lub w poprzek brzucha.

Rozlegający się co 10 sekund sygnał dźwiękowy świadczy o tym, że urządzenie pracuje, a zabieg jest w toku. W ciągu ostatnich 30 sekund zabiegu, sygnał dźwiękowy rozlega się co 5 sekund.

Urządzenie powinno pozostawać w ciągłym kontakcie ze skórą. Oderwanie go od powierzchni skóry przerywa przepływ prądu i zakłóca zabieg. W takim przypadku, dioda na urządzeniu zaczyna migać, a sygnały dźwiękowe ustają do momentu przywrócenia obwodu prądu.

### 1. Zakończenie zabiegu

Po zakończonym zabiegu, urządzenie wydaje jeden długi sygnał dźwiękowy oraz dwa krótkie, oznajmiając koniec jego działania. Z ekranu znika ikonka zegara i czas zabiegu. Należy usunąć ze skóry nadmiar preparatu. Wyrzeć urządzenie i przystawkę czystą, wilgotną szmatką i osuszyć. Nie należy stosować chemicznych środków czyszczących, ponieważ mogą spowodować uszkodzenie urządzenia. Przechowywać w suchym miejscu.

### 2. W celu zintensyfikowania korzystnego działania zabiegów zaleca się stosowanie produktu ageLOC® Dermatic Effects® codziennie, rano i wieczorem. Przed zastosowaniem tego produktu należy dokładnie zapoznać się ze sposobem użycia.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat wykonywania zabiegów, należy zapoznać się z instrukcją obsługi, która jest dostępna na płycie CD-ROM dołączonej do zestawu lub w Bibliotece zakładki Biuro. Korzystać wyłącznie zgodnie ze wskazaniem.